

Imbragatura per toilette – Per spostamenti verso i servizi igienici o per procedure di igiene personale

L'imbragatura Active Micro Guldmann è ideale per spostare gli utenti in posizione seduta, in particolare per l'accesso ai servizi igienici e altre procedure di igiene personale.

Supporta la parte superiore del corpo (dalla regione pelvica fino a sotto le spalle) ed è fissata intorno al torace e alla parte alta delle cosce. Le cinghie di supporto si fissano automaticamente durante il sollevamento. È ideale per il sollevamento di utenti che possono controllare la testa ma hanno funzioni limitate nella parte superiore del corpo, dei fianchi e delle cosce.

L'imbragatura è dotata di un'ampia apertura nella parte inferiore, che agevola l'accesso all'abbigliamento anche se l'utente resta seduto sull'imbragatura. Il modello è ideale per le situazioni in cui è necessario indossare e rimuovere l'imbragatura in modo rapido, e può essere usato anche se l'utente soffre di spasmi da estensione.

L'imbragatura Active Micro Guldmann è disponibile in diverse taglie ed è realizzata in tessuto di poliestere.

Capacità di sollevamento fino a 255 kg.

Può essere usata con tutti i sollevatori a soffitto e mobili Guldmann.

Per ulteriori informazioni su come scegliere l'imbragatura e la taglia corretta, consultare la guida Guldmann all'imbragatura e alle taglie Guldmann.

L'utilizzo dell'imbragatura più idonea è fondamentale per trasferimenti efficaci e per garantire il comfort, la dignità e la sicurezza dell'utente e dell'assistente sanitario.



Per persone con spasmi da estensione


DATI TECNICI

Nr articolo	Taglia	Materiale
GL 284041	S	Polyester
GL 284051	M	Polyester
GL 284061	L	Polyester

Linee guida per scegliere la taglia di un'imbragatura

Imbragature ABC

Dimensioni in cm

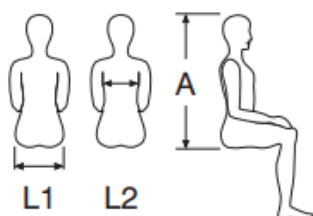

L2 = Misure del torace

x) Linee guida per scegliere una Active Trainer

xx) Linee guida per scegliere una Active Vest Kids

Size / cm	A	L1	L2 ^{x)}	L2 ^{xx)}
Kids 2-4				46 - 54
Kids 4-6	45 - 60	25 - 30		50 - 65
Kids 6-10	55 - 70	28 - 35		51 - 72
Kids 10-14	55 - 70	28 - 35		
Kids 10-16				56 - 75
XS	75 - 82	33 - 37	70 - 105	
S	80 - 87	36 - 40	75 - 110	
M	85 - 92	39 - 43	80 - 120	
L	90 - 97	42 - 45	90 - 130	
XL	95 - 102	45 - 49	100 - 140	
2XL	95 - 102	48 - 52	110 - 150	
3XL	95 - 102	54 - 58		
4XL	95 - 102	57 - 63		
5XL	95 - 102	62 - 73		