




POGGIATESTA

Semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente. Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza.

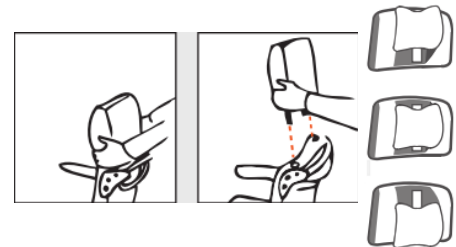

SCHIENALE

Schienale anatomico con supporto lombare reclinabile. Regolabile in più posizioni con meccanismo a gas tramite leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore

Opzioni:

1. schienale reclinabile indipendente dal riposa gambe
2. schienale reclinabile in simultanea con il riposa gambe




SEDUTA

La seduta è ergonomica e confortevole, possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti

BRACCIOLI

Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale. Regolabili in altezza in 6 posizioni

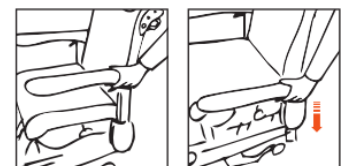

FRENI


Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida. Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.

APPOGGIA PIEDI

A scomparsa sotto la seduta, o ribaltabile



Scheda tecnica

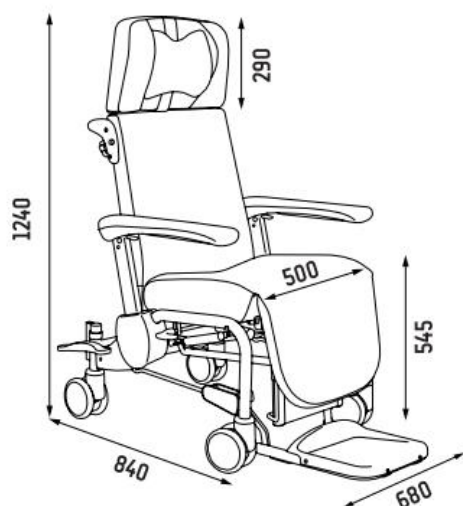

DATI TECNICI

Colore	a scelta	
Larghezza seduta	50	cm
Profondità seduta	52	cm
Altezza seduta	50	cm
Altezza braccioli	0 / 22	cm
Larghezza totale	68	cm
Altezza schienale	81	cm
Altezza totale	124	cm
Lunghezza totale	84	cm
Inclinazione schienale	- 18° a - 61°	
Portata peso max	135	kg
Peso articolo	37	kg