


## POLTRONA MEDICALIZZATA RHEA

### POGGIATESTA

Semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente.  
Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza

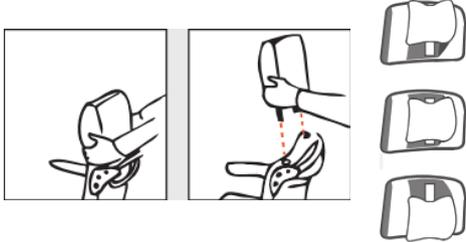

### SCHIENALE

Schienale anatomico reclinabile con supporto lombare rinforzato, la seduta segue in sincronia lo schienale.  
Grazie alle leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore, queste operazioni possono essere eseguite sia dall'utente sia dal personale di cura



### SEDUTA

La seduta è ergonomica, confortevole e removibile per una migliore igiene; possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti e diversi tipi di movimentazione.

### BRACCIOLI

Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale. Regolabili in altezza in 6 posizioni




### FRENI

Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida.  
Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.


### APPOGGIA PIEDI

Ribaltabile, anti-basculante, regolabile in altezza in modo di adeguarlo all'altezza del paziente

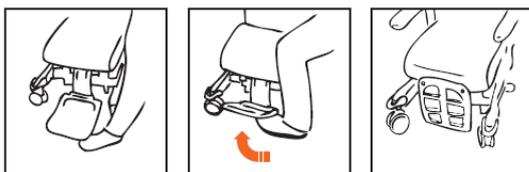

## DATI TECNICI

Colore	a scelta	
Larghezza seduta	50	cm
Altezza seduta	51-80	cm
Altezza braccioli	0 / 22	cm
Larghezza totale	72	cm
Altezza schienale	96	cm
Altezza totale	125-154	cm
Lunghezza totale	87	cm
Portata peso max	135	kg
Peso articolo	65	kg

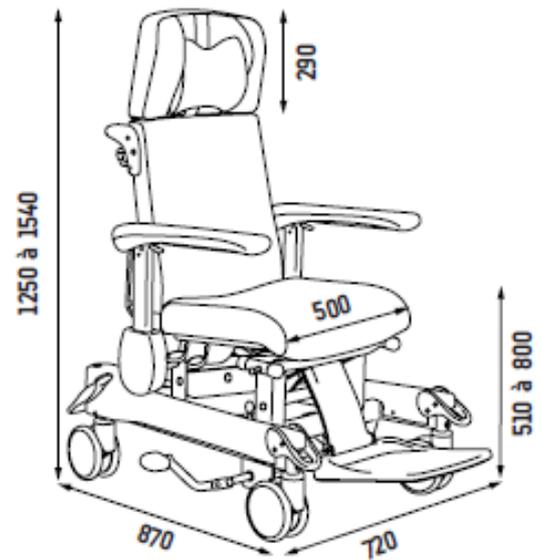

Poids du siège : 65 kg

Charge maximum : 135 kg

Dimensions en mm