

### DESCRIZIONE

#### **POGGIATESTA**

Poggiatesta semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente.

Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza.



#### **SCHIENALE**

Schienale anatomico con supporto lombare reclinabile.

Regolabile in più posizioni con meccanismo a gas tramite leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore

#### **SEDUTA**

La seduta è ergonomica e confortevole, possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti.

Disponibile in diverse opzioni di movimento

**1. inclinabile verso la parte posteriore e sincronizzata allo schienale. È elevabile verso la parte anteriore per facilitare l'entrata e l'uscita dell'utente.**

**2. inclinabile verso la parte posteriore e sincronizzata con lo schienale.**

**3. inclinata verso la parte posteriore.**



#### **BRACCIOLI**

NL Neolab SA – Via Résiga 1 – 6883 Novazzano


[www.neolab.ch](http://www.neolab.ch)

[info@neolab.ch](mailto:info@neolab.ch)

Prodotti per la cura, la salute ed il benessere – Mezzi ausiliari per l'indipendenza a domicilio – Forniture ospedaliere e per case anziani

Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale.

Regolabili in altezza in 6 posizioni

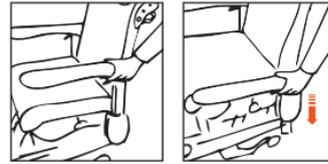

## FRENI


Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida.  
Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.

## APPOGGIA PIEDI

Ribaltabile



## Scheda tecnica

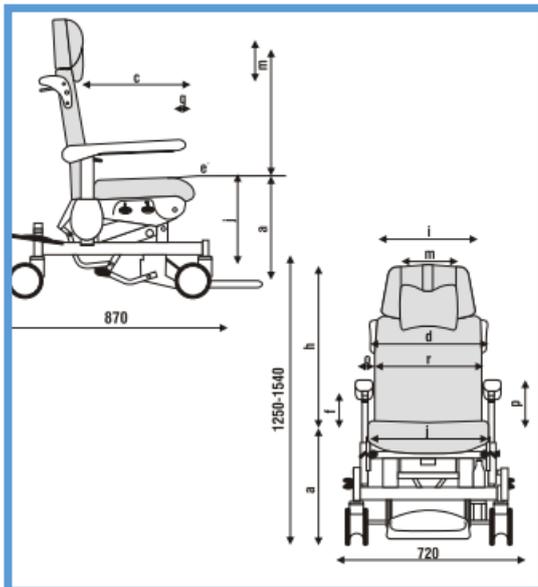

Colore	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza schienale (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Inclinazione schienale	Portata peso max (kg)	Peso Poltrona (kg)
A scelta	50	46	51/80	0/22	72	810	125/154	87	-12° a -45°	135	65