

ROLLATOR TOPRO TROJA 2G

Leggero, pratico e maneggevole
 Rimane in piedi anche da chiuso
 4 ruote, di cui 2 con freni, completamente amovibili e intercambiabili
 Manopole anatomiche e regolabili in altezza.
 Porta ombrelli/bastone
 Sedile e cestino a rete



Schienale su richiesta



Altri accessori su richiesta

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Larghezza chiuso (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
TROJA 2G MEDIUM	Da magazzino	47	62	60	78-100	24	150	7.7
TROJA 2G SMALL	Da magazzino	47	54	60	67-86	24	125	7.3

LA NUOVA GENERAZIONE DI deambulatori!

Maggiore sicurezza, flessibilità e il miglior comfort possibile

TOPRO TROJA 2G è la seconda generazione della gamma Topro.

Studiato per assicurare sempre maggior sicurezza, flessibilità e comfort.

Una differenza che lo contraddistingue sono le impugnature innovative TOPRO Ergo Grip che offrono nuove superfici di presa e di supporto ergonomiche.

Esse combinano la posizione di presa della mano originale dei modelli TOPRO Troja (1) con una impugnatura (2) sul lato anteriore del manico.

Questo vi dà una migliore posizione di tenuta al momento di alzarsi da una sedia o un divano (3).

Sempre assicurarsi che il freno di stazionamento sia bloccato quando si esegue questa operazione (4.).

La nuova impugnatura offre anche un sostegno supplementare quando si è in piedi (5.).

Diverse opzioni di sostegno rendono facile variare la propria posizione, aumentando così la vostra comodità.

Quando si usa il deambulatore le mani devono sempre essere tenute in posizione normale in modo di avere accessibilità ai freni. Le impugnature ergonomiche, sono dotate di un sistema "Memory" che permette il riposizionamento stabilito dall'utente.




Il sistema antiribaltamento aiuta a superare gradini o cordoli

Le sue 4 ruote possono essere rimosse con semplicità nel caso servisse ulteriore spazio (per esempio durante il trasporto in auto) e le stesse sono intercambiabili tra loro. Negli accessori sono disponibili ruote adatte a strade sterrate, con ciottoli, ecc....

I potenti freni danno sicurezza anche in fase di stazionamento, permettendo così all'utente di sedersi in tutta tranquillità.

La gamma Topro offre inoltre ulteriori "Optional" per i suoi Rollator ad esempio, borse, schienale, scaldamani, ombrellino, porta ossigeno e molto altro ancora.

Venite a scoprire le varie possibilità e create il vostro Rollator personale

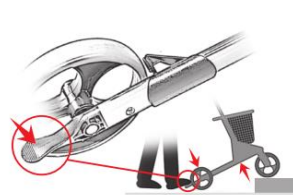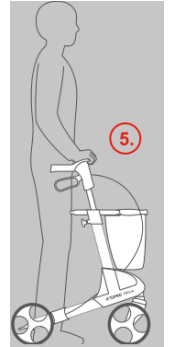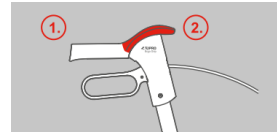

ACCESSORI

				
Adjustable back support with padding 814607	Tray 814728	Anti slip mat for tray 814059		
				
Net basket detachable 814625	Shopping bag detachable 814622	814642	814643	814641
				
Rear bag with zipper 814046	Transport bag 814042	Crutch holder 814025	Bottle holder 814043	
				
Flower stickers, 4 stickers 814141	Nameplate 814024	Lock 814023	Umbrella with attachment 814068	
				
New! Offroad wheels for IBS, set of 4 814649	Lamp 814608	LED light with fall alarm (pair) 814609	Ice spurs for shoes M (shoe size 36-40) 814029 L (shoe size 41-46) 814035	
				
One-handed brake 814026	Ice spurs for shoes Size M (shoe size 36-40) 814029 Size L (shoe size 41-46) 814035	Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid) 814009		