


QUICK RAISER DUE, VERTICALIZZATORE CON BASE DIVARICABILE

Verticalizzatore con telaio in alluminio molto compatto, perfetto per l'utilizzo in ambienti domestici ma ideale anche nelle strutture ospedaliere grazie all'altezza delle gambe di soli 70 mm e la portata fino a 160 Kg.

Quick Raiser 2 è progettato specificatamente per i trasferimenti seduto-seduto, facile da utilizzare ed estremamente comodo per effettuare trasferimenti ed esercizi di training volti ad aiutare il paziente a riacquistare la coscienza del carico sugli arti inferiori, imitando al meglio il movimento naturale del corpo che si sposta verso l'alto e in avanti grazie alla particolare angolazione della colonna.

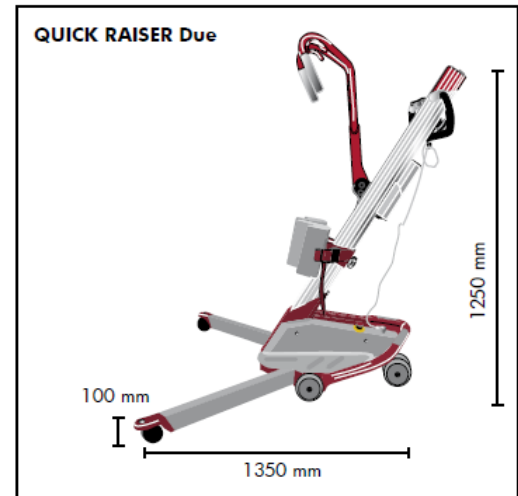

- Braccio svincolato dal sistema di alzata per evitare ogni possibilità di schiacciare la persona in fase di discesa del braccio stesso
- Elettronica dotata di blocco automatico in caso di pesi superiori alla portata massima
- Tasto di arresto di emergenza del sistema elettrico
- Sistema manuale di discesa: qualora vi sia un guasto che blocca il sollevatore con la persona sollevata è possibile agire manualmente sul sistema di alzata per riportare la persona in appoggio.
- Portata fino a 160 Kg

IMBRACATURA (DISPONIBILE A PARTE)



Grazie alla retrazione addominale del paziente la funzione auto-bloccante dell'imbracatura si attiva automaticamente durante la verticalizzazione del paziente

MISURE DISPONIBILI

S – M - L

DATI TECNICI

Cod. 813502	QUICK RAISER Due
Materiale	alluminio, acciaio
Motore	12 V DC
Meccanismo	Vite senza fine
Batteria	14.4 NiCd 1,9 Ah
Capacità di carico max	160 Kg
Alt. max di sollevamento	37 Kg
Altezza base	100 mm dal pavimento
Lunghezza base	1350 mm
Altezza totale sollevatore	1250 mm
Larghezza base	610 mm max esterna - 360 mm min. interna
Apertura base raggiungibile	1084 mm interna