


## CUSCINO IN GEL POLIURETANO E POLIURETANO

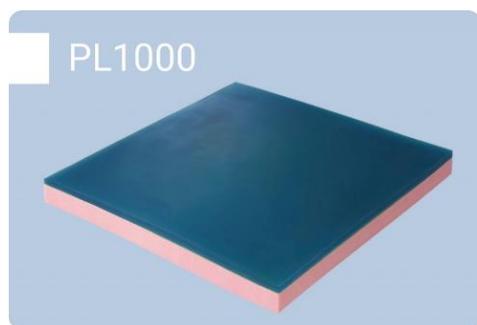

Cuscino antidecubito in gel di poliuretano utilizzato a scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti che trascorrono molto tempo seduti.

Il cuscino è composto da uno strato in gel di poliuretano con alto assorbimento delle pressioni e uno strato di poliuretano espanso di densità 40 Kg/m<sup>3</sup>.

L'azione combinata del gel e del poliuretano espanso garantiscono una diminuzione delle pressioni di contatto e consentono un significativo aumento della superficie di appoggio.

Non lavabile.

Il telo di copertura è realizzato in poliestere che presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, traspiranza al vapore acqueo e bielasticità. La cover ha un fondo antiscivolo per consentire un maggiore ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. È facilmente rimovibile con cerniera, sanificabile (può essere lavato a mano a 60°).

### DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL100040	40 cm	40 cm	3 cm	110 kg
CEUROPL100042	42 cm	42 cm	3 cm	110 kg
CEUROPL100045	45 cm	45 cm	3 cm	110 kg