


CUSCINO IN GEL POLIURETANO E SCHIUMA POLIURETANO

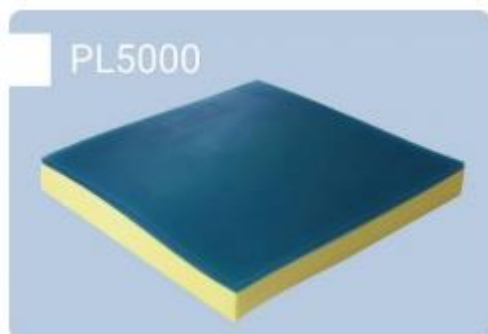

Cuscino antidecubito in gel di poliuretano utilizzato a scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti che trascorrono molto tempo seduti.

Il cuscino è composto da una base di schiuma di poliuretano a lenta memoria su cui è posizionato uno strato in gel di poliuretano contenuto in un involucro di poliuretano estensibile e ipoallergenico. Il poliuretano garantisce un elevato grado di assorbimento della pressione d'appoggio, il gel assicura un'ottima distribuzione del peso per attutire le pressioni.

Non lavabile.

Il telo di copertura è realizzato in poliestere che presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, traspiranza al vapore acqueo e bielasticità. La cover ha un fondo antiscivolo per consentire un maggiore ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. È facilmente rimovibile con cerniera, sanificabile (può essere lavato a mano a 60°).

DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL500040	40 cm	40 cm	5 cm	110 kg
CEUROPL500042	42 cm	42 cm	5 cm	110 kg
CEUROPL500045	45 cm	45 cm	5 cm	110 kg