


MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

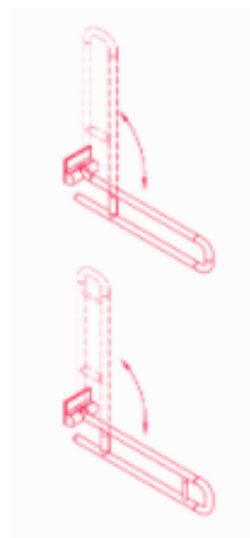

Maniglione di sostegno ribaltabile realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta.

Ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, rinforzo centrale, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra in poliammide.

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Materiale	Lunghezza		Diametro	
ST N32.110	Acciaio portante	60	cm	3.2	cm
ST N32.111	Acciaio portante	70	cm	3.2	cm
ST N32.112	Acciaio portante	80	cm	3.2	cm

ACCESSORI

PIASTRA DI RINFORZO PER PARETE IN CARTONGESSO

MA.PTR

