


### **DESCRIZIONE**

#### **POGGIATESTA**

Poggiatesta semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente.  
Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza.

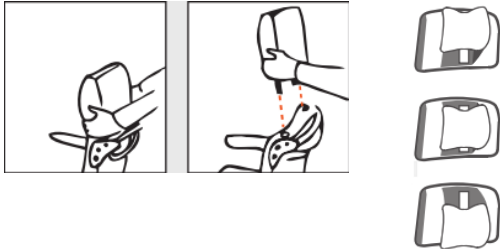

#### **SCHIENALE**

Schienale anatomico con supporto lombare reclinabile.  
Regolabile in più posizioni con meccanismo a gas tramite leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore

#### **SEDUTA**

La seduta è ergonomica e confortevole, possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti.  
Disponibile in diverse opzioni di movimento

**1. inclinabile verso la parte posteriore e sincronizzata allo schienale. È elevabile verso la parte anteriore per facilitare l'entrata e l'uscita dell'utente.**

**2. inclinabile verso la parte posteriore e sincronizzata con lo schienale.**


**3. inclinata verso la parte posteriore.**



## BRACCIOLI

Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale.

Regolabili in altezza in 6 posizioni

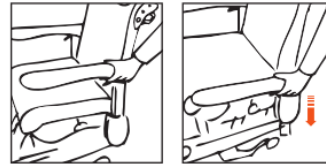

## FRENI

Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida.


Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.

## APPOGGIA PIEDI

Ribaltabile



## Scheda tecnica

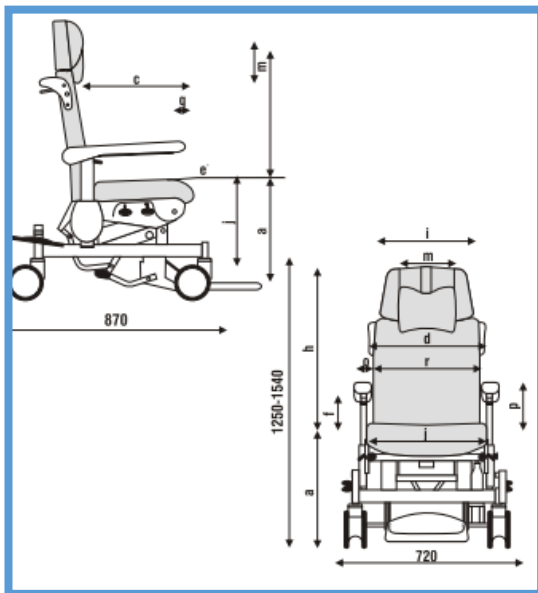

| Colore   | Larghezza seduta (cm) | Profondità seduta (cm) | Altezza seduta (cm) | Altezza braccioli (cm) | Larghezza totale (cm) | Altezza schienale (cm) | Altezza totale (cm) | Lunghezza totale (cm) | Inclinazione schienale | Portata peso max (kg) | Peso Poltrona (kg) |
|----------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| A scelta | 50                    | 46                     | 51/80               | 0/22                   | 72                    | 810                    | 125/154             | 87                    | -12° a -45°            | 135                   | 65                 |

## Ulteriori informazioni dal fornitore

### RELEVÉS DIMENSIONNELS (mm)

Référentiel NF Santé

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| a/ Hauteur d'assise / sol         | 510 à 800 |
| b/ Hauteur d'assise / repose-pied | 430 à 720 |
| c/ Profondeur plateau assise      | 460       |
| d/ Largeur utile plat.d'assise    | 500       |
| Rayon bord avant d'assise         | 100       |
| r/ Largeur entre accotoirs        | 530       |

Référentiel NF Santé

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| e-/ Inclinaison arrière plateau d'assise | -5° à -15°  |
| e+/ Inclinaison avant plateau d'assise   | +15°        |
| i/ Largeur minimale du dossier           | 470         |
| f/ Hauteur maintien lombaire             | -           |
| h/ Hauteur du dossier                    | 810         |
| l/ Inclinaison du dossier                | -12° à -45° |
| Angle assise/dossier                     | 97° à 123°  |
| n/ Longueur utile de l'accotoir          | 490         |
| o/ Largeur utile de l'accotoir           | 70          |
| p/ Hauteur de l'accotoir                 | 0 à 220     |
| q/ Profondeur accotoir/avant assise      | 70          |
| Diamètre avant accotoir                  | 40          |
| m/ Largeur repose-nuque                  | 260         |
| Hauteur repose-nuque                     | 200         |
| Hauteur repose-nuque / assise            | 540 à 710   |
| j/ Largeur repose-jambes                 | -           |
| Longueur repose-jambes                   | -           |
| Inclinaisons repos / maxi                | -           |
| Largeur repose-pieds                     | 330         |
| Longueur repose-pieds                    | 350         |
| Angles repliés / ouvert                  | -10°/90°    |