

CUSCINI ANTIDECUBITO E POSIZIONAMENTO



Il comfort nasce spesso dai piccoli dettagli, soprattutto quando si tratta di trascorrere molte ore seduti o di avere bisogno di un maggiore sostegno nella quotidianità.

In questo catalogo abbiamo raccolto una selezione di cuscini pensati per offrire comfort, sostegno e una migliore esperienza di seduta, adattandosi a diverse esigenze e situazioni.

Materiali, forme e caratteristiche differenti permettono di trovare la soluzione più adatta, con particolare attenzione al benessere della persona e alla qualità dei prodotti.

Per noi, scegliere un cuscino non significa semplicemente trovare un accessorio, ma prendersi cura del proprio comfort, giorno dopo giorno.

Con esperienza e attenzione, siamo al tuo fianco per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, con la stessa cura che mettiamo in ogni nostra scelta.

CUSCINO A CELLE D'ARIA



Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti realizzato in totalmente in caucciù, ad alta tenuta. La conformazione delle celle a nido d'ape gonfiata ad aria permette di equilibrare la posizione e la gestione della pressione di contatto.

Il cuscino è adattato con persone con lesioni cutanea, lesioni del midollo spinale, con sclerosi multipla e spina bifida.

Nella versione con celle alte 10 cm è indicato per ulcere.


Non lavabile, trattare con un panno umido e detergenti non aggressivi e privi di candeggina.

Rivestimento esterno composto da tessuto bielastico asportabile tramite cerniera su tre lati, impermeabile e traspirante. Trattato ignifugo e lavabile a 30°. La parte inferiore è composto di un tessuto antiscivolo che permette un'adeguata presa sulla seduta del paziente.

DATI TECNICI:

Nr. Articolo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL904040	40 cm	40 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL904044	44 cm	40 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL964040	40 cm	40 cm	6.5 cm	150 kg
CEUROPL964044/6	44 cm	40 cm	6.5 cm	150 kg
CEUROPL964444	44 cm	44 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL964444/6	44 cm	44 cm	6.5 cm	150 kg
CEUROPL964448	48 cm	44 cm	10 cm	150 kg
CEUROPL964448/6	48 cm	44 cm	6.5 cm	150 kg

CUSCINO IN GEL POLIURETANO E SCHIUMA POLIURETANO

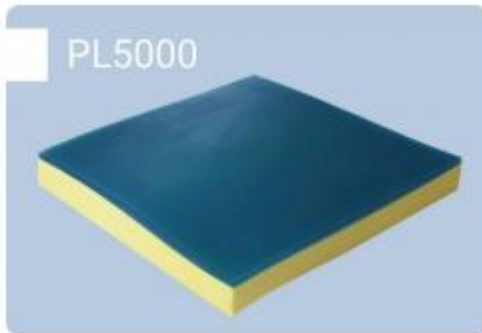

Cuscino antidecubito in gel di poliuretano utilizzato a scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti che trascorrono molto tempo seduti.


Il cuscino è composto da una base di schiuma di poliuretano a lenta memoria su cui è posizionato uno strato in gel di poliuretano contenuto in un involucro di poliuretano estensibile e ipoallegernico. Il poliuretano garantisce un elevato grado di assorbimento della pressione d'appoggio, il gel assicura un'ottima distribuzione del peso per attutire le pressioni.

Non lavabile.

Il telo di copertura è realizzato in poliestere che presenta caratteristiche antibatteriche, impermeabilità ai liquidi, traspiranti al vapore acqueo e bielastiche. La cover ha un fondo antiscivolo per consentire un maggiore ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. È facilmente rimovibile con cerniera, sanificabile (può essere lavato a mano a 60°).

DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL500040	40 cm	40 cm	5 cm	110 kg
CEUROPL500042	42 cm	42 cm	5 cm	110 kg
CEUROPL500045	45 cm	45 cm	5 cm	110 kg

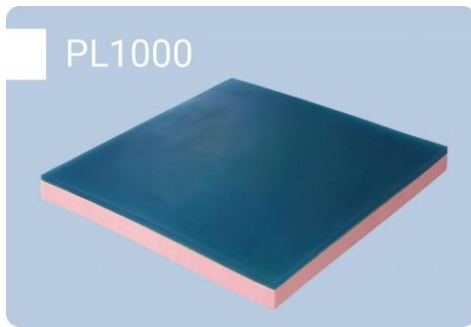CUSCINO IN GEL POLIURETANO E POLIURETANO


Cuscino antidecubito in gel di poliuretano utilizzato a scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti che trascorrono molto tempo seduti.

Il cuscino è composto da uno strato in gel di poliuretano con alto assorbimento delle pressioni e uno strato di poliuretano espanso di densità 40 Kg/m³.

L'azione combinata del gel e del poliuretano espanso garantiscono una diminuzione delle pressioni di contatto e consentono un significativo aumento della superficie di appoggio.

Non lavabile.

Il telo di copertura è realizzato in poliestere che presenta caratteristiche antibatteriche, impermeabilità ai liquidi, traspiranti al vapore acqueo e bielastiche. La cover ha un fondo antiscivolo per consentire un maggiore ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. È facilmente rimovibile con cerniera, sanificabile (può essere lavato a mano a 60°).

DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL100040	40 cm	40 cm	3 cm	110 kg
CEUROPL100042	42 cm	42 cm	3 cm	110 kg
CEUROPL100045	45 cm	45 cm	3 cm	110 kg

CUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL FLUIDO



Il cuscino a gel fluido viene usato per scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti che trascorrono molto tempo seduti.

Il cuscino è costituito da gel fluido e da una base in poliuretano espanso (densità 21 kg/m³). Il tutto contenuto in una sacca in PVC. La fluidità dello strato in gel consente un'ottima distribuzione del peso corporeo del paziente, diminuendo i picchi pressori.

Non lavabile, trattare con un panno umido e detergenti non aggressivi e privi di candeggina.

Rivestimento esterno composto da tessuto in poliestere con caratteristiche antibatteriche, impermeabilità dei liquidi, traspiranti al vapore acqueo e bielastiche (consente di diminuire gli attriti superficiali tra cute e cuscino).

La parte inferiore è composta da un tessuto antiscivolo per consentire un ancoraggio sicuro alla sedia. È facilmente rimovibile con cerniera e lavabile a 60° a mano.

DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL300	40 cm	40 cm	4 cm	90 kg
CEUROPL300/SM	42 cm	42 cm	4 cm	90 kg
CEUROPL300-SM	45 cm	45 cm	4 cm	90 kg

CUSCINO ANTIDECUBITO VISCOELASTICO


Cuscino antidecubito realizzato in schiuma in espanso viscoelastico a lenta memoria.

Il materiale consente al cuscino di modellarsi automaticamente al paziente, così da garantire l'ottimale e uniforme distribuzione del peso su tutta la superficie, riducendo la pressione di contatto.

Il cuscino non è lavabile.

Rivestimento esterno composto da tessuto bielastico in poliestere. Presenta caratteristiche antibatteriche, impermeabilità ai liquidi, traspirabilità il vapore acqueo, inoltre è dotato di fondo antiscivolo che consente un ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. Facilmente rimovibile con cerniera, lavabile fino a 60° a mano.

DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata peso max
CEUROPL200 40	40 cm	40 cm	6 cm	110 kg
CEUROPL200	42 cm	42 cm	6 cm	110 kg
CEUROPL200/44-8	48 cm	44 cm	6 cm	110 kg
CEUROPL200/SM	45 cm	45 cm	6 cm	110 kg

SISSEL SIT RING



- Seduta senza pressioni in ogni situazione!
- Per la cura e la profilassi del decubito
- Per chi ha difficoltà a stare seduto in seguito a operazioni a perineo o intestino, emorroidi, durante o dopo la gravidanza
- Prodotto nel rispetto dell'ambiente, con schiuma PU senza CFC
- Compatto, anallergico, atossico, ignifugo
- Federa in morbida spugna di cotone 100%, lavabile
- Misure: Ø 45 cm (esterno), Ø 11 cm (interno)
- Altezza: 8 cm
- Disponibile in 2 versioni: forma tonda o forma ovale

Cuscino rotondo

SISSEL1070119

Cuscino ovale

SISSEL117089

CUSCINO A CUNEO TEMPUR

TEMPUR124599



Il cuscino a cuneo della Tempur dona sollievo alla schiena in modo naturale.

Grazie alla sua configurazione il cuscino a cuneo spinge in avanti il bacino, consentendo di assumere automaticamente una postura verticale.

Ideale per chiunque lavori in posizione seduta, in particolare gli utenti di PC.



DATI TECNICI

Larghezza	40	cm
Lunghezza	40	cm
Altezza	1 / 9	cm



- Rilassa colonna vertebrale
- Posizione seduta ergonomica e anatomica
- Forma stabile a cuneo, tagliato in un unico pezzo
- Cuneo interno in poliuretano espanso riciclato al 100%

DATI TECNICI

Larghezza	35	cm
Lunghezza	35	cm
Altezza	6.5	cm



Sostegno e sollievo ottimali per il corpo

Riempimento: polistirolo

Quantità di riempimento variabile attraverso la cerniera

Lavabile fino a 60°C

Senza federa

Dimensioni: 195 x 35 cm

SISSEL Cuscino di posizionamento Comfort con imbottitura in polistirolo

Cuscini di posizionamento e di allattamento

Con Sissel Comfort con imbottitura in polistirolo, è possibile posizionare il corpo in modo ottimale per ottenere un sollievo. Le anche e le varie parti del corpo in posizione dorsale o laterale vengono sostenute e alleggerite. Perfetto durante la gravidanza e l'allattamento o per l'assistenza ai pazienti allettati. Il cuscino viene fornito senza fodera.



Riempimento in polistirolo

L'imbottitura è costituita da microsfere, che rendono il cuscino particolarmente aderente. È leggero (circa 0,75 kg), lavabile in lavatrice a 60 °C, testato per le sostanze nocive e non sterilizzabile.

FODERA per cuscino COMFORT e RELAX

FODERA per cuscino COMFORT e RELAX in ciniglia bi color

FODERA per cuscino COMFORT e RELAX PU impermeabile

NL Neolab SA, Via Résiga 1, 6883 Novazzano

www.neolab.ch

info@neolab.ch

Prodotti per la cura, la salute ed il benessere – Mezzi ausiliari per l'indipendenza a domicilio – Forniture ospedaliere e per case anziani

GUANCIALE TEMPUR SHAPE


Il guanciale TEMPUR Shape dalla celeberrima forma ergonomica è ora disponibile con un'innovativa fodera rinfrescante grazie alla tecnologia Smartcool. Mentre all'interno il materiale Tempur conferisce un solido sostegno personalizzato, adattandosi perfettamente alla testa, al collo e alle spalle, all'esterno la nuova fodera SmartCool assorbe il calore corporeo in eccesso, garantendoti maggiore freschezza

Misure:

Lunghezza: 50 cm

Larghezza: 31 cm

	Nr. Articolo	Altezza
S	TEMPUR83300180	8 / 5 cm
M	TEMPUR83300181	10 / 7 cm
L	TEMPUR83300182	11.5 / 8.5 cm

Il rivoluzionario design a farfalla culla la testa e il collo in un allineamento naturale, così le tue notti agitate possono trasformarsi in un sonno profondo, sano e rigenerante




Dimensioni ideali per un supporto perfetto

Ogni curva si adatta alla forma naturale del tuo corpo, mantenendolo allineato per garantirti il sonno più profondo e ristoratore di sempre.



CUSCINO NORMALE

Affonda e si appiattisce durante la notte, lasciando il collo contorto in posizioni dolorose. Ogni volta che ti giri e ti rigiri la situazione peggiora, poiché il supporto svanisce quando ne hai più bisogno.

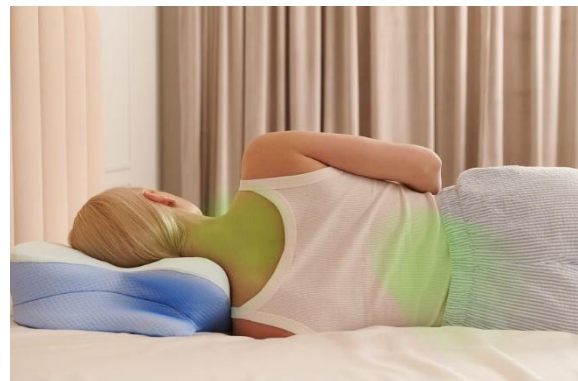

CUSCINO FARFALLA

Le zone di supporto progettate aiutano a mantenere la colonna vertebrale in un allineamento naturale per tutta la notte. Ogni curvatura si adatta alla forma del corpo, mantenendo i

CUSCINO FARFALLA

NL FARFALLA



Il cuscino Farfalla è progettato per **offrire un supporto ottimale** e affidabile al collo, favorendone il **corretto allineamento**, contribuendo a ridurre il fastidio e a farvi sentire più riposati al mattino.

È progettato inoltre per **favorire una migliore respirazione**, contribuendo ad **allineare testa e collo**. Il suo design ergonomico contribuisce a creare un ambiente più rilassato e silenzioso per il sonno.




Il tessuto all'avanguardia aiuta a regolare la temperatura, mantenendovi freschi e asciutti per tutta la notte. La federa rinfrescante garantisce un sonno confortevole, soprattutto per chi tende a sentire il caldo durante il sonno.



Realizzato in memory foam di alta qualità, questo cuscino si adatta alla forma del collo per un supporto aggiuntivo. Che dormiate su un fianco, sulla schiena o in altre posizioni, godetevi un sonno ristoratore per tutta la notte.

Questo cuscino è realizzato con materiali resistenti che ne mantengono la forma nel tempo, offrendo un confort duraturo. La **federa sfoderabile e lavabile** lo rende facile da pulire, garantendo un'esperienza di sonno confortevole.

CUSCINI SAPONETTA

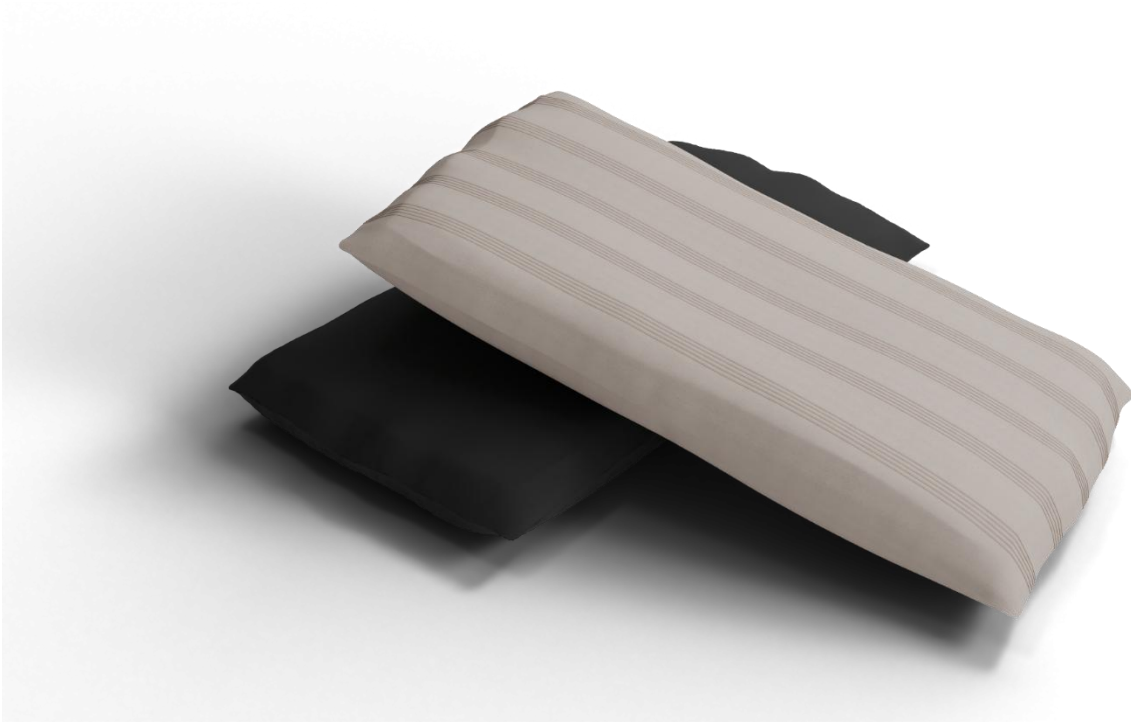

Guanciali da degenza realizzati in poliuretano espanso a celle aperte per garantire una migliore traspirabilità.

Struttura monoblocco sagomata a saponetta, soffice, confortevole e indeformabile.

Disponibile con fodera antibatterica e antimicotica.

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Dimensione
EUROSAP/F/13	CM 73x42x13H
EUROSAP/F/07	CM 73x42x8H

CUSCINO IN MIGLIO E IN FARRO**SISSEL Cuscino di Miglio Panicore**

100% di miglio

Sostiene la colonna vertebrale cervicale in modo naturale

Basso livello di rumore e di polvere

Equalizzazione della temperatura, rimozione dell'umidità

Dimensioni: circa 60 x 40 cm


**SISSEL Cuscino di farro Palea**

Federa in 100% cotone

Non lavabile

Dimensioni: circa 60 x 40 cm

Riempimento da agricoltura biologica

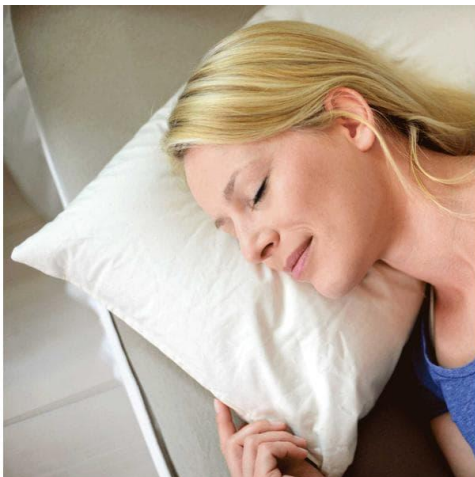

Il cuscino di farro Sissel Palea si adatta completamente alla forma della testa e del collo. È composto al 90% da silice ed è quindi particolarmente ben tollerato. Il cuscino viene fornito senza fodera.